



НАБИР PRO^{VB-PSK} SKIN

by vacSy[®]

Вітаємо Вас з придбанням набору ProSkin!

Зануртесь у світ турботи про себе і насолоджуйтеся інноваційним досвідом догляду за шкірою з набором ProSkin - колекцією косметичних аксесуарів, ретельно розроблених для того, щоб побалувати та освіжити вашу шкіру.

Делікатна дія вакууму на шкіру стимулює клітинну регенерацію, покращує кровообіг і сприяє виробленню колагену, а дотик справжньої алмазної пудри освітлює та омолоджує шкіру.

З набором ProSkin у себе вдома ви досягнете результатів, які можуть конкурувати з найпрестижнішими салонами краси.

НАБІР
PRO
SKIN *by* vacSy™

ЗМІСТ

- 1. Вступ**
- 2. Правила безпеки та запобіжні заходи**
- 3. Набір ProSkin**
 - 3.1. Відлущувальна насадку
 - 3.2. Насадку для боротьби з чорними цятками
 - 3.3. Насадку для підтяжки обличчя
 - 3.4. Вакуумні баночки
- 4. Застосування**
- 5. Технічне обслуговування**
- 6. Декларація відповідності**

Принцип дії набору ProSkin

Набір ProSkin забезпечує 5 сприятливих ефектів дбайливого впливу на шкіру за допомогою вакууму, створюючи атмосферу СПА прямо у Вас вдома.

Кожен аксесуар з набору Pro Skin ретельно розроблений для вирішення певної б'юті-завдачі, забезпечуючи унікальний комплексний догляд.



Підходить для всіх типів шкіри



Оновлює клітини шкіри



Робить шкіру більш гладкою та оксамитовою

**НАБІР
PRO
SKIN** by vacSy

Інструкція з експлуатації

Будь-ласка, уважно прочитайте правила безпеки та запобіжні заходи, використовуйте продукт тільки відповідно до цих правил, щоб уникнути випадкових травм або пошкоджень.



Цей знак попереджає про ризик травмування.



Цей знак попереджає про ризик отримання травми від електрики.

У комплект входить:

- Насадка, що відлущує
- Насадка для боротьби із чорними точками
- Насадка для підтяжки обличчя
- 2 вакуумні баночки
- 25 змінних фільтрів
- 1 мішечок для аксесуарів

1. Вступ

Зустрічайте набір ProSkin - краса і технології поєднуються воедино!

Це перший у світі пристрій для мікродермабразії з алмазною пудрою, який очищує пори, усуває чорні точки, протистоїть ознакам старіння, стимулює вироблення колагену та еластину, сприяє оновленню клітин та покращує сяйво шкіри. Всього 10 хвилин масажу обличчя на тиждень перетворять вашу шкіру за 4 тижні, роблячи її здоровішою та сяючою.



Важливо, що аксесуари з набору ProSkin можна використовувати тільки у поєднанні з вакуумним насосом Vacsy Deluxe, VB-P* від Zepher. Насос оснащений датчиком, який автоматично розпізнає аксесуари та активізує потрібний режим для процедури.

* Купується окремо

2. Правила безпеки та запобіжні заходи

- ⚠️ Обов'язково прочитайте посібник перед використанням цього пристрою та збережіть його для подальшого користування.
- ⚠️ Цей пристрій не є іграшкою, зберігайте його в недоступному для дітей місці.
- ⚠️ Відмовтеся від використання пристрою під час подразнення або запалення шкіри.
- ⚠️ Переконайтеся, що полімерний фільтр встановлений правильно. Фільтр, руки та шкіра мають бути сухими. Шкіра може трохи почервоніти після використання. Якщо почервоніння не проходить, проконсультуйтеся з лікарем щодо можливості подальшого застосування.
- ⚠️ Не використовуйте пілінги, абразивні або інші косметичні засоби, що можуть спричинити подразнення, до і після використання набору ProSkin.
- ⚠️ Не підходить для використання: вагітним жінкам; дітям; людям, які страждають на епілепсію, пухлини або запальні процеси; людям із кардіостимуляторами; особам, чутливим до тепла та вібрації; тим, хто страждає на екзему або дерматологічні захворювання.
- ⚠️ Обмежте використання до 2 раз на тиждень.

Під час використання:

- ⚠️ Уникайте різкого відриву пристрою від шкіри.
- ⚠️ Не затримуйтеся на одній ділянці шкіри більше 2 секунд.

3. Набір ProSkin

3.1 Відлущуюча насадка (поверхня з алмазним напиленням):

Відкрийте для себе сяйво Вашої шкіри



Потужність:



Виведення токсинів:



Покращення мікроциркуляції:

Насадка, оснащена мікрокристалічною поверхнею зі справжнього алмазного пилю, яка делікатно видаляє тьмяні, відмерлі клітини шкіри, готуючи ідеальну основу для догляду за шкірою.

Рекомендації з використання:

Підходить для всіх типів шкіри, можна використовувати на всіх ділянках обличчя. Рекомендована тривалість кожного сеансу: 8-10 хвилин для досягнення найкращих результатів.



! **Переміщуйте пристрій по шкірі рухами вперед і назад.**

! **Робіть повільні та плавні рухи.**



**НАБІР
PRO
SKIN** by vacSy

3.2 Насадка для боротьби з чорними цятками: Цілеспрямоване видалення чорних крапок



Потужність:



Виведення токсинів:



Покращення мікроциркуляції:

Насадка призначена для видалення чорних цяток, зменшення вироблення шкірного сала, глибокого очищення пор. Насолоджуйтесь впевненістю в собі з чистою, сяючою та красивою шкірою.

Рекомендації з використання:

Ідеально підходить для жирної та комбінованої шкіри. Цю насадку, завдяки її ефективності, рекомендується використовувати в області носа.



3.3 Насадка для підтяжки обличчя: Ліфтинг та скульптування



Потужність: ██████████

Виведення токсинів: ██████████

Поліпшення мікроциркуляції: ██████████

Унікальна форма цієї насадки ідеально підходить для масажу шкірних тканин та активації крово- та лімфообігу. Масаж цією насадкою сприяє виробленню колагену та еластину, помітно зменшує дрібні зморшки та надає видимий ліфтинг-ефект.

Рекомендації щодо використання:

Підходить для застосування в області щік, вилиць, чола та лінії підборіддя.



! **Переміщуйте пристрій рухами вперед та назад по шкірі.**

! **Робіть повільні та плавні рухи**



НАБІР
PRO
SKIN by vacSy[™]

3.4 Вакуумні баночки: Поліпшення загального самопочуття



Потужність: ██████████

Виведення токсинів: ██████████

Поліпшення мікроциркуляції: ██████████

Введення в баночну терапію

Баночна терапія - це давня східна техніка, яка використовує чаші для створення вакууму, що сприяють виробленню колагену та еластину. Техніка ефективна для косметичних процедур, зменшення целюліту та для допомоги спортсменам після тренувань:

- Стимулює вироблення колагену та еластину
- Зменшує набряки, біль у м'язах та кінцівках
- Позбавляє целюліту та розтяжок

Рекомендації щодо використання:

Баночна насадка може бути використана на руках, плечах, спині, животі, боках, стегнах та сідницях.



Баночна терапія



Перед початком процедури пам'ятайте про необхідність зволоження шкіри за допомогою олійки або крему. Це забезпечить легке ковзання банкової насадки вашою шкірою, мінімізуючи дискомфорт і подразнення.

Стандартний режим

- ① Поставте банку на зону дії. Створіть вакуум, а потім заберіть насос.
- ① Тримайте банку на шкірі, поки вакуум не зникне.
- ① Цей режим ідеально підходить для полегшення болю в м'язах та кінцівках.

Масажний режим

- ① Виконуйте всі дії по інструкції стандартного режиму.
- ① Потім вручну рухайте насадку по тілу близько 10 хвилин.
- ① Ідеально підходить для усунення целюліту, розтяжок та проведення розслаблюючого масажу.



Засіб від болю



Зменшення целюліту




Баночна терапія




Покращення кровообігу

Запобіжні заходи та можливості застосування

Уникайте впливу на області з пошкодженою шкірою та варикозним розширенням вен, а також застосуванню особами із сильною худорлявістю (з виступаючими під шкірою кістками).

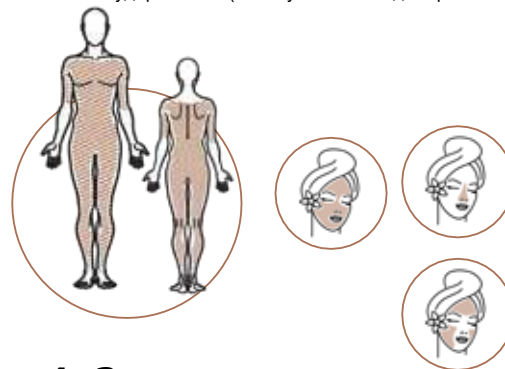

4. Застосування

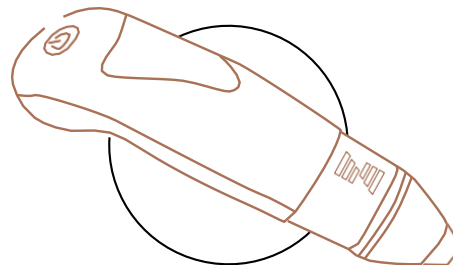

а) Рекомендації перед початком використання пристрою для досягнення найкращих результатів та забезпечення безпеки:

- ① Перед першим використанням обов'язково повністю зарядіть вакуумний насос.
 - ① Використовуйте слабкий режим всмоктування перших процедур.
 - ① Перед кожною процедурою розкривайте пори за допомогою пари або теплого рушника.
-

б) Покрокова інструкція по роботі з пристроєм:

- ① Виберіть потрібну насадку для вашої процедури.
 - ① Вставте фільтр у насадку.
 - ① Підключіть насадку до насосу VacSy.
 - ① Натисніть один раз на кнопку живлення, щоб встановити швидкість.
 - ① Кожен наступний натиск по кнопці живлення збільшує швидкість на один рівень до максимального рівня 4.
 - ① Щоб вимкнути насос, утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд.
-

НАБІР
PRO
SKIN *by* **vacSy**

в) Підготовка шкіри перед початком процедур

- ① За допомогою засобу для демакіяжу видаліть косметику зі шкіри та вмийте обличчя.
 - ① Розкрийте пори за допомогою пари.
 - ① Проведіть процедуру за допомогою набору ProSkin.
 - ① Зволожіть шкіру обличчя за допомогою крему або зволожуючої олійки.
 - ① Насолоджуйтесь сяйвом вашої шкіри. Використовуйте до 2-х разів на тиждень.
-

г) Частота використання і результати

- ① Результат буде помітним через 4-6 тижнів застосування пристрою на постійній основі. Дотримуйтесь рекомендацій, щоб розкрити природне сяйво шкіри!
-

5. Технічне обслуговування

Очищення насадок ProSkin:

- ① Промивайте та протирайте насадки після кожного використання.
-

Очищення вакуумного насоса:

- ① Використовуйте вологу тканину для очищення вакуумного насоса
 - ① Не занурюйте вакуумний насос у воду; це може призвести до незворотних наслідків.
-

Заміна фільтрів:

- ① Змінійте фільтри після 6-8 застосувань.

НАБІР
PRO
SKIN by vacSy

6. Декларація відповідності

Zepter Group підтверджує, що всі хімічні речовини, які використовуються при виробництві даних аксесуарів, повністю відповідають усім правилам та нормам, встановленим Європейським Союзом.

Ця декларація підтверджує дотримання найвищих стандартів якості та безпеки відповідно до застосованих директив ЄС.

Ознайомтеся з продуктами для здорового способу життя від Zepter



BIOTRONIC
MedAll

БЕЗПЕЧНИЙ І
ЕФЕКТИВНИЙ МЕДИЧНИЙ
АПАРАТ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я, КРАСИ
І ДОБРОГО САМОПочУТТЯ



Therapy Air®



Майбутнє вашого зору –
вже сьогодні

**HYPERLIGHT
OPTICS**

THE FUTURE
OF VISION, TODAY.




VB-PSK

НАБІР
PRO
SKIN *by* vacSy[®]


INTERNATIONAL
ЖИВИТЕ ЛУЧШЕ • ЖИВИТЕ ДОЛЬШЕ

www.zepter.ua